

■ Rufauslöser für besondere Fälle

Y-Adapter

Y-Kabel und Y-Adapter


Es kommt immer öfters vor, dass an einem Bett mehrere Anschlüsse für Rufauslöser vorhanden sein müssten.

Einerseits wird ein Birn- oder Mehrfachtaster angeschlossen, andererseits wäre der Wunsch für eine Kontaktmatte, einen Schallwächter, einen Bewegungssensor, usw vorhanden.

Ohne Installationsaufwand erbringen zu müssen, empfehlen wir zu unseren Patienten-Rufsystemen, unser Y-Kabel oder unseren Y-Adapter (bei Einsatz Mehrfachtaster mit Lichtschaltung!).

Abbildung:

- Y-Kabel mit 2 Abgängen für Rufauslösung und Beruhigungslampe
- Y-Kabel mit 2 Abgängen für Rufauslösung und Beruhigungslampe, der eine Ausgang ist schaltbar, damit zum Beispiel eine Kontakt-Matte am Tag deaktiviert werden kann.
- Y-Adapter mit 2 Abgängen für Rufauslösung und Beruhigungslampe. Ebenfalls können darüber die Mehrfachtaster mit Lichttaster oder mit Storensteuerung (Pfeil auf/ab) angeschlossen werden. Dieser Adapter ist für Ruhe- und Arbeitsstrom umschaltbar.

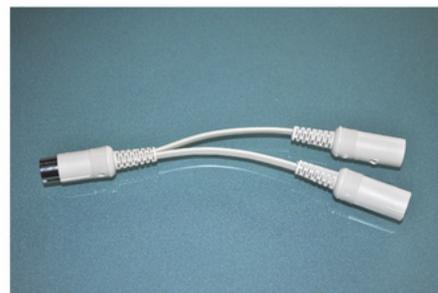

Rufauslösemöglichkeiten:

Funkuhr Birntaster und Mehrfachtaster

Schallmelder Türwächter

Kontaktmatte

