


### E S A G

Wir sichern Ihre Kommunikation

# 🛮 Kabellose Pflegerufzentrale, Pageranbindung

R703


die kabellose Rufzentrale mit 200 Meldefeldern speziell für grosse Häuser oder Häusern mit Vollausstattung

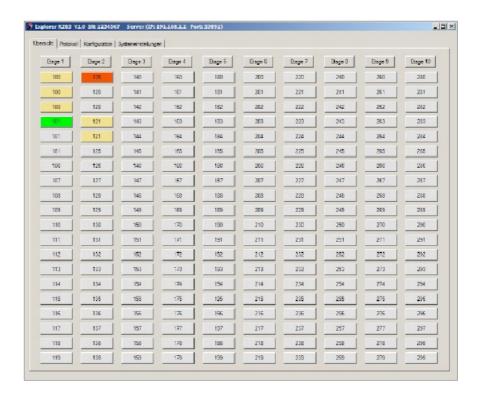

Die Rufzentrale RZ03 ist der große Bruder der RZ02.

Mit ihren 200 Meldefeldern, praxisnahen Einstellmöglichkeiten und Funktionen sowie der Möglichkeit, über die Zentrale per Funksignal Leuchten, Beruhigungslichter, o.ä zu schalten, bietet die neue FU\_RZ03 für fast alle Anwendungsfälle eine Lösung.

Anbindungsmöglichkeiten an Pagersysteme und gängige Ruf- und Telefonanlagen sind bereits vorinstalliert. Auch die Kommunikation über Netzwerk zu weiteren Systemgateways ist implementiert.

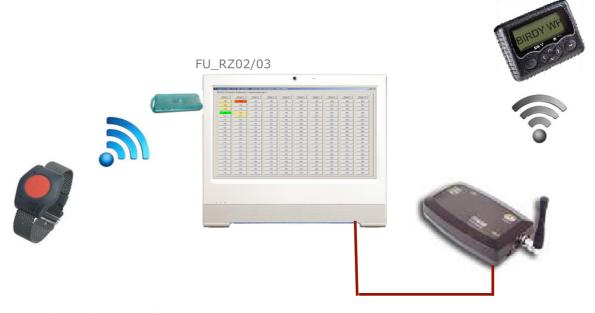

ESAG Kommunikations-Systeme AG

Hauptsitz: Steinbruggstrasse 21 | 8165 Oberweningen | T 044 852 39 39 | info@esag-systems.ch | www.esag-systems.ch

Unsere UID:CHE-105.933.365 MWST Filiale Bern: Tannackerstrasse 7 | 3073 Gümligen T 031 951 47 51

#### FSAG

Wir Sichern Ihre Kommunikation

# Kabellose Pflegerufzentrale, Pageranbindung

R703

### Folgende Funktionen und Einstellmöglichkeiten werden u.a. unterstützt:

- Anzeige von bis zu 200 aktuellen Funk-Rufsignalen und deren Weiterleitung auf angeschlossene Pagersysteme oder Ruf- und Telefonanlagen
- Zusammenfassen von Meldefeldern zu logischen Einheiten, um z.B. Zimmer oder Raumzuordnungen leichter zu erkennen.
- Einzel- und Sammelquittierung von Rufsignalen möglich, damit sich z.B. logisch zusammengefasste Rufe mit nur einem Quittierungssender zurücksetzen lassen
- Meldetexte für Ruf- und Quittungssignale sind individuell und einfach editierbar
- Rufsignalunterdrückung individuell anpassbar; d.h. wahlweise zeitgesteuert oder durch Roomservice-/Stummschaltesender zur kurzzeitigen Abschaltung der Zimmerrufe bei Reinigungs- und Servicetätigkeiten; Rücksetzung erfolgt durch einen Quittierungssender oder nach Ablauf der einstellbaren Zeitdauer.
- Vitalmonitorfunktion, zeitgesteuert von 0-24h einstellbar; d.h. wird in der eingestellten Zeit kein Funkrufsignal empfangen, dann erfolgt die Rufsignalisierung auf das Meldesystem
- Individuelle Zuordnung der Rufsignale auf bis zu 200 verschiedene Pageradressen/ Telefone für den Tag- und Nachtbetrieb.
- Umschaltung zwischen Tag- und Nachtbetrieb zeitgesteuert einstellbar oder alternativ über Funksendersignal umschaltbar
- Protokollfunktion mit der Erfassung aller Rufe, Rufzeiten, Servicedauer, Servicefunktionen, Parameteränderungen in verschlüsselten Protokolldateien.
- automatische Rufwiederholung von 0-20 min einstellbar, Rufwiederholung wird wiederholt, bis die Quittierung erfolgt;
- Für Kontrollgänge kann die Anwesenheit der Pflegekraft im Zimmer durch Betätigung des Quittierungssenders protokolliert werden.
- Schalten von bis zu 200 Funkempfängern, z.B. für Beruhigungslicht, etc. aus der Schaltansicht möglich. Das Schalten kann manuell, manuell bei "Ruf aktiv" und automatisch konfiguriert werden.
- Einlernen eines Funksenders als Masterschlüssel zur autorisierten Freigabe von Konfigurationen und Systemeinstellungen

• Automatisches Tages-Backup aller Protokoll- und Systemdateien mit Datums kodierten Dateien .Weiterverarbeitung der verschlüsselten Protokolldateien über den mitgelieferten "Backup Viewer RZ03"

möglich



Protokoli Raum Datum Pager Text 2012/11/11 17:57:07 100 Servicedauer überschritten 2012/11/11 17:52:55 120 Roomservice: 00:00:03 2012/11/11 17:52:49 120 Rufsender Herr Schmidt Dauer: 00:00:06 2012/11/11 17:52:46 120 Anwesenheit 2012/11/11 17:42:03 Demo 120 Rufsender Herr Schmidt Dauer: 00:10:43 2012/11/11 17:41:40 Demo 120 Rufsender Herr Schmidt Dauer: 00:00:21 2012/11/11 17:41:27 Demo 120 Rufsender Herr Schmidt Dauer: 00:00:12